

AxioSnapMount ASM 210

die Splitcastkontrolle mit dem XSS Distanzsockel
the splitcast control with the XSS spacer block



Gebrauchsanleitung
Instruction manual

1.



Nachdem Ober -und Unterkiefermodell im Artikulator montiert sind,
kann die Splitcastkontrolle vorgenommen werden.

*Once the upper and lower jaw models have been mounted in the articulator,
the split cast control can be carried out.*

2.



Dazu wird der Inzisalstift abgesenkt
und der Magnet aus dem Distanzsockel entnommen.

*For this purpose, the incisal pin is lowered
and the magnet is removed from the spacer block.*

3.



Der Magnet wird durch die Gewindescheibe ersetzt
und festgeschraubt.

*The magnet is replaced with the threaded disc
and screwed in tightly.*

4.




Das Artikulatoroberteil wird bei geschlossener Zentrikverriegelung auf das Oberkiefermodell rotiert.

The articulator upper part is rotated onto the upper jaw model with the centric lock closed.

! Der Artikulator muss eine geschlossene Zentrik aufweisen !

! The articulator must have a closed centric !


5.

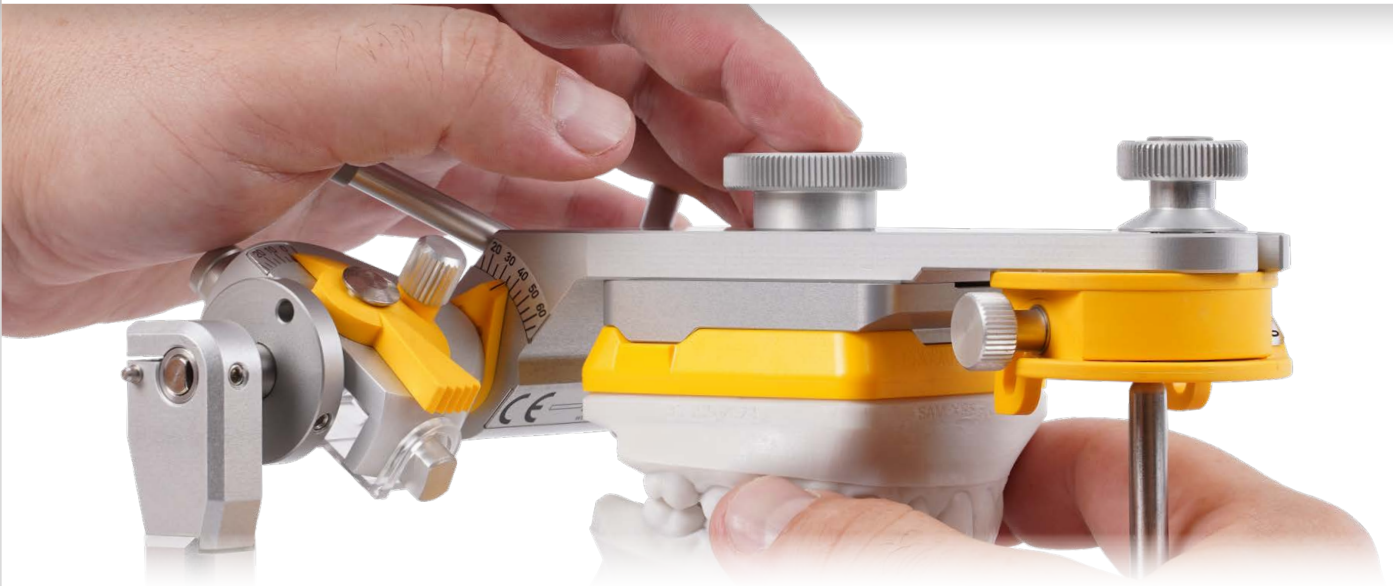

Die Modellmontage ist korrekt, wenn nach dem Schließen der Distanzsockel und die Montageplatte genau ineinanderpassen.

The model assembly is correct if, the spacer block and the mounting plate fit exactly into each other after closing.


6.

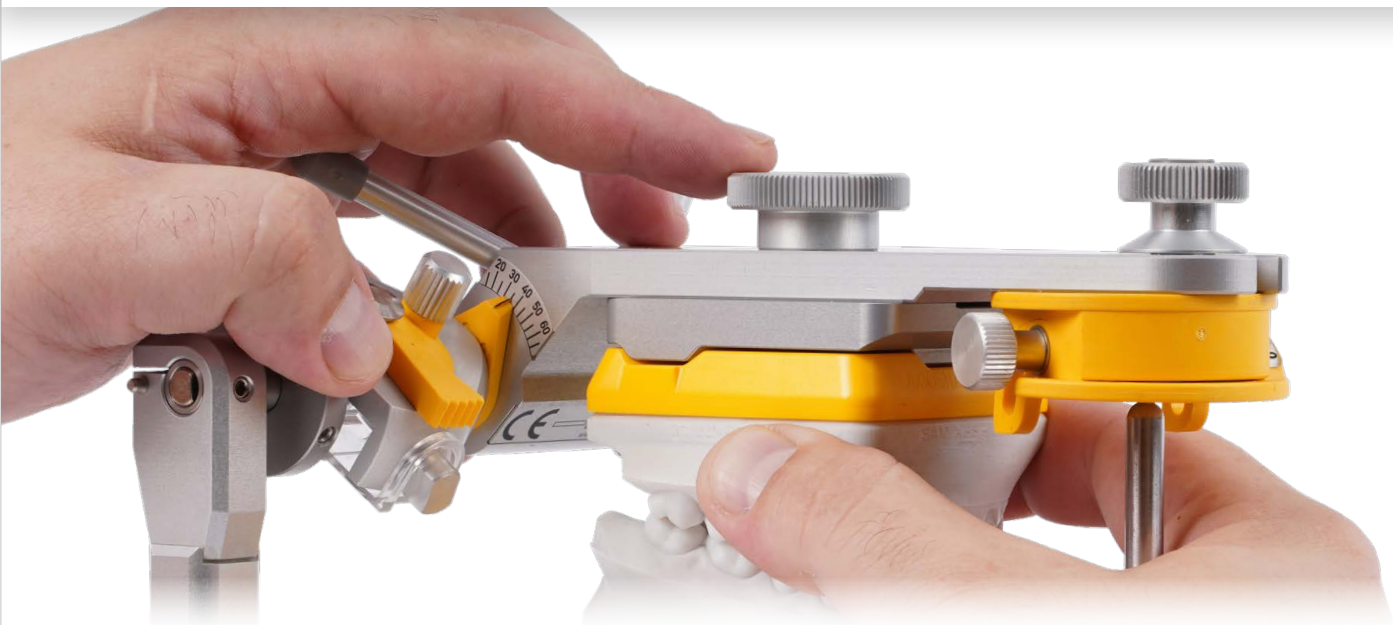

Ein Randspalt zwischen Distanzsockel und Montageplatte könnte z.B. einen Modelldruckfehler bedeuten. Dies gilt auch für den Vergleich verschiedener Registrate.

A gap at the edge between spacer block and mounting plates could mean for example a model printing error. This also applies to the comparison of different registers.

The End

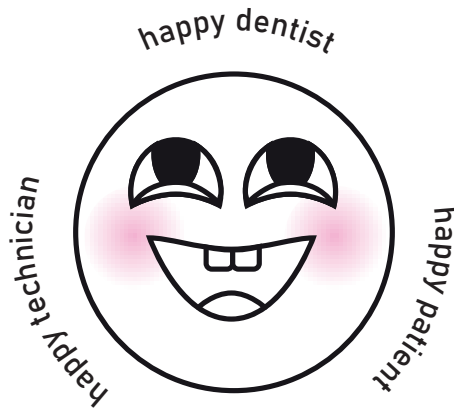

Nur für Artikulatoren mit Schraubgewinde.
Nicht mit MPS-System kombinierbar.
MPS kann mit ART 113 umgerüstet werden.

*Only for articulators with screw thread.
Cannot be combined with the MPS system.
MPS can be converted with ART 113.*

SAM Präzisionstechnik GmbH
Fussbergstrasse 1
82131 Gauting
Germany

www.sam-dental.de